

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE HECES: Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT) / iFOBT / Sangre Oculta

RECIPIENTE

El kit de recolección incluye lo siguiente:

- Recipiente para la recolección (frasco para muestras)
- Papel de recolección
- Sobre





INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOLECCIÓN

Puede que los resultados de la prueba no sean válidos si la muestra no se toma correctamente.

NO SE REQUIERE NINGUNA DIETA ESPECIAL ANTES DE TOMAR LA MUESTRA

1. Coloque el papel de recolección provisto dentro de la taza del inodoro, sobre el agua.
2. Deposite la muestra de heces sobre el papel de recolección. Asegúrese de tomar la muestra antes de que el papel se hunda y toque el agua.
3. Gire y levante la tapa VERDE del recipiente de recolección para abrirla. Es muy importante que no abra el extremo blanco.
4. Raspe la superficie de la muestra de heces con la sonda para muestras.

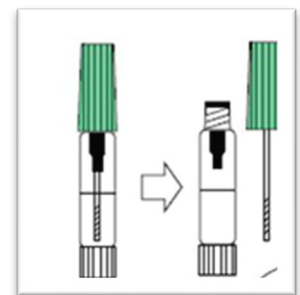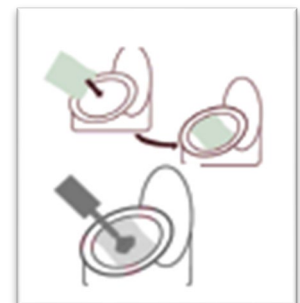

Raspe extensamente la superficie de las heces o pínchelas en 5 o 6 partes diferentes.



Cubra por completo con heces la parte de la sonda para muestras que tiene ranuras.

5. Vuelva a introducir la sonda con la muestra de heces en el recipiente y enrosque con fuerza la tapa verde. No vuelva a abrir el frasco.
6. Deseche el papel con el resto de la muestra en el inodoro; es biodegradable y no daña los sistemas sépticos.
7. Complete toda la información necesaria en el recipiente de la muestra, incluida la información del paciente y la fecha y hora en que se tomó la muestra.
8. Lleve la muestra al laboratorio en el sobre que le proporcionamos.

